

MODUL AIR



福祉先進国のオランダ「OTOLIFT社」と
日本の「スギヤス」がタッグを組んだイス式階段昇降機

[モジュールエアー]

おしゃれな
ライフスタイルにピッタリ

Bishamon[®]

ROYAL
OTOLIFT
STAIRLIFTS

 株式会社 **スギヤス**

会社ホームページはこちら
<http://bishamon.co.jp/>



E-mail: sales@bishamon.co.jp

〒444-1394 本社 愛知県高浜市本郷町四丁目3番地21 TEL.0566-53-1126 FAX.0566-53-1844

〒146-0083 東京 東京都大田区千鳥2丁目2番12号 TEL.03-3759-9722 FAX.03-3759-9723

〒537-0002 大阪 大阪府大阪市東成区深江南2丁目3番22号 TEL.06-6747-7617 FAX.06-6747-7618

2301-3000-ITP

■業務グループ TEL.0566-53-1126 FAX.0566-53-1844



スギヤス ワンダーランド

Welcome!

Area Map

自動車整備
ワールド

物流機器
ワールド

環境機器
ワールド

住宅福祉機器ワールド

自動車整備用リフトとハンドリフトの
国内シェアNo.1
信頼と実績のブランドBishamonが
本気で作った福祉機器

型式適合認定

型式適合認定品とは、国土交通省が定めた安全基準に適合し、
個別の認定番号が付与されています。



納入事例紹介

街の **こんなところ** で役立っています

【集合住宅】



4階に住んでいます。足を悪くしてから、階段を使うのが辛くて外出しなくなっていました。階段昇降機を取付けた事で気軽に買い物に行ける様になりました。



【店舗】



店舗部分と居住部分の間には階段があります。お店に毎日顔を出したい、車イス生活の母の為に階段昇降機を設置しました。笑顔で接客している母を見る事ができ、私も嬉しいです



【住宅】



突然の交通事故、それ以来1階での生活になりました。階段昇降機を設置して10年ぶりに2階にある子供たちの部屋を掃除してあげる事が出来ました。



【寺社仏閣】



本堂まで急な階段があり、足の不自由な方はお参りし辛くなっていました。階段昇降機を設置したところ、観光客の皆様喜んで頂けました。



【船舶】



展望デッキには、階段を登らないと行けません。年に一度の花火大会を少しでも多くのお客様に観覧してもらえる様に、楽に使える階段昇降機を設置しました。



【住宅】



道から玄関まで15段の階段があります。デイサービスに通っていますが、送迎時階段の昇り降りが大変で設置しました。介助者さんも、楽になったと大喜びです。






どの機種を選んだら良いのかな？

ご自宅の階段の形状は？


直線

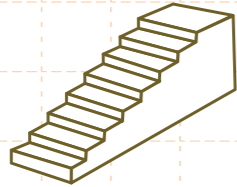

上から下までまっすぐ

昇助くんSEC P7~ 昇助くんSEO P13~

曲線

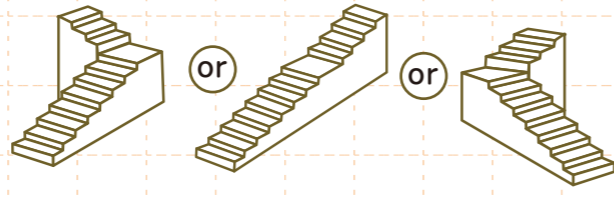

途中で曲がっている or 踊場が有る or 3階建て以上

昇助くんNRE P15~ モジュールエア P22~




欲しい時はどうしたら良いのかな？

ご相談・お見積りからお引渡しまで

ご相談・お見積りからお引渡しまでの流れをご案内いたします。ご参考の上、まずは、お気軽にお問合せください。

¥0 お見積りまでは無料です。お気軽にお問い合わせください。

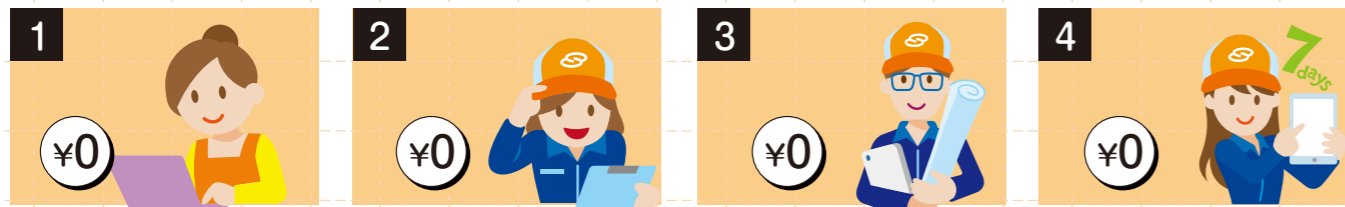

1 お見積りの依頼

お電話、またはホームページのお問合せページから見積り(無料)の依頼をしてください。

2 現地調査

販売店担当者が現地調査日時を確認を行い、お約束の日時に現地調査に伺います。

3 レール設計

CADによるレールの設計を行います。

4 見積書の提出

現地調査後、おおよそ1週間で販売店担当者よりお見積書を提出します。



5 ご契約

ご契約が終わりましたら、いよいよ施工の準備に入ります。



6 製作

徹底した品質管理の下で、お客様専用の昇助くんを製作いたします。



7 取付工事

お約束の日に取り付工事を行います。特別な場合を除き1日で工事が完了いたします。



8 お引渡し

一年間の保証をお付けしております。また保守メンテナンス契約のご加入をお勧めしています。



試乗できる場所はありますか？

関東地区



東京支店

〒146-0083

東京都大田区千鳥2-2-12

TEL.03-3759-9722

中部地区



西尾工場

〒445-0004

愛知県西尾市西浅井町二川崎47-4

TEL.0563-52-2221

関西地区



大阪支店

〒537-0002

大阪府大阪市東成区深江南2-3-22


TEL.06-6747-7617



どこに問い合わせたら良いのかな？

お問い合わせ

株式会社 スギヤス 会社ホームページはこちら → <http://www.bishamon.co.jp/>

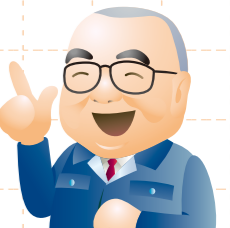

[業務グループ] E-mail:sales@bishamon.co.jp

TEL.0566-53-1126

〒444-1394 本社 愛知県高浜市本郷町四丁目3番地21 TEL.0566-53-1126 FAX.0566-53-1844
〒146-0083 東京 東京都大田区千鳥2丁目2番12号 TEL.03-3759-9722 FAX.03-3759-9723
〒537-0002 大阪 大阪府大阪市東成区深江南2丁目3番22号 TEL.06-6747-7617 FAX.06-6747-7618
[その他営業拠点] 仙台・前橋・広島・坂出・福岡

定期点検制度について より安全に、末長くご使用いただけるよう専門技術者による定期的な点検を受けていただくことをお勧めします。詳しくは、お求めの販売店へご相談ください。

※サビは保証の対象外とさせていただきます。※本製品は寒冷地仕様になっておりません。
●カタログに記載されている製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読の上、正しくご使用ください。



[設置に必要な条件]

屋内設置

ご使用可能体重90kgまで

設置可能レール角度 0~70度

使用環境温度 0~40℃

AC100V 家庭用コンセント



設置できない階段の種類

強度が低い階段

階段の踏み面が
凸凹した階段

踏み面の広さが
バラバラの階段

より複雑な階段形状でも対応可能です



急こう配の階段にも

ハシゴを上る感覚に近い、70度の勾配にも取付できます。

平坦な床での急なカーブもスムーズです

最小半径は20cmです。



最下限部分でも安心

写真の様なレール設置ができるため、廊下をご使用する方の妨げを最小限に抑える事が出来ます。

【モジュールエアーの設置例】



【一般的な階段昇降機設置例】



簡単な操作で優れた機能が満載

コンパクト収納

使用しないときに座面・肘掛・足置き台をたたんで収納しておくことができます。同居している方が通るときに邪魔になりにくいです。



操作しやすいレバー

主電源スイッチ一体型の操作レバーです。指以外、腕で操作する事も可能です。



足置き台

肘掛のスイッチで、足置き台を電動で折りたためます。



腰掛け回転

腰掛けと一緒に足置き台も回転します。回転は上階側/下階側で行う事が出来、電動で行えるため停止位置を自由に設定する事が出来ます。



最新機能を搭載した、安心の安全性

充電式

充電されたバッテリーで昇降します。突然の停電でもご安心頂けます。



シートベルト

福祉用の巻き取り式シートベルトを使用しています。



どなたにも安心な装備

イスには各種安全装置が取付いており、ご利用中の挟み込みや下敷きを防ぎます。



呼び送りスイッチ

ボタン操作でイスの呼び送りを行う事が出来ます。



より便利な自由設定

お客様のご利用の状態によって、一番適したイスの動きを自由に設定する事が出来ます。

- 上下階でのいす回転の有無や、回転角度
- 壁に膝が当たってしまう場合に、イスを少し回転させたまま上昇出来る

※設置の環境においてこの機能をお使いいただけない場合がありますので詳しくは弊社までお問い合わせください。

